

Превосходящие характеристики

Превосходящие характеристики

Расширенная линейность и улучшенные характеристики

Передовая технология подсчета и технология динамического слежения значительно расширяют линейность и улучшают точность. Применение метода робастного анализа минимизирует влияние помех и позволяет точно подсчитать тромбоциты.


Превосходные реагенты, контрольные материалы и калибраторы

Высококачественные системные реагенты, калибраторы и контрольные материалы составляют совершенную систему для наших пользователей. Безцианидные реагенты позволяют лабораториям соответствовать экологическим требованиям. Полноценная система прослеживаемости обеспечивает сопоставимость со стандартными методами.



Высококачественный дизайн

Новый дизайн внутренней структуры располагает электронные компоненты отдельно от гидравлической системы, устраняя интерференцию и облегчая обслуживание.

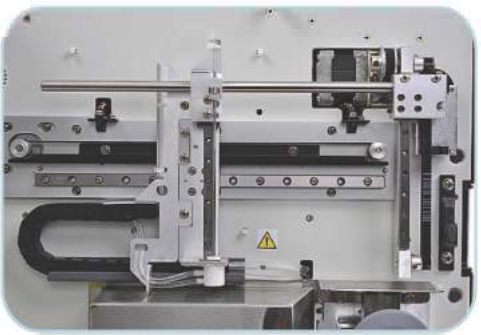

BC-3600

Автоматический гематологический анализатор

Технические характеристики

Определяемые параметры

WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC и гистограммы для WBC, RBC, PLT

Технологии

Электрическое сопротивление для подсчета WBC, RBC и PLT, бесцианидный метод для гемоглобина

Характеристики

Параметр	Линейность	Коэффициент вариации (CV%)
WBC ($10^9/l$)	0 - 300	≤ 2.5 (7.0 - 15.0)
RBC ($10^{12}/l$)	0 - 8.00	≤ 2.0 (3.50 - 6.50)
HGB (г/л)	0 - 280	≤ 1.5 (100 - 180)
MCV (фл)		≤ 1.0 (80.0 - 110.0)
PLT ($10^9/l$)	0 - 3000	≤ 4.0 (150 - 500)

Объем пробы

Предразведение - 20 мкл
Цельная кровь - 17мкл

Производительность

60 проб в час

Дисплей

Цветной сенсорый дисплей
с разрешением 800x600



121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, 88
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: RLJ5-BC3600-2128546-20120127

Перекрестное загрязнение

WBC, RBC, HGB < 0.5%, PLT < 1.0%

Интерфейсы

4 порта USB (для внешнего принтера, обновления программы, сканера штрих-кодов, клавиатуры и мыши), LAN (1), RS232 (1)

Печать

Термопринтер с шириной бумаги 50мм, различные форматы распечаток, возможность подключения внешнего принтера

Требования к окружающей среде

Температура: 15 °C~30 °C
Влажность: 30%~85%

Электропитание

Переменное напряжение 100-240V, 50/60±1 Hz

Размеры

≤ 395 мм (Ш) $\times \leq 450$ мм (Г) $\times \leq 445$ мм (В)

Вес

≤ 28 кг



BC-3600

Автоматический Гематологический Анализатор

Приятный опыт гематологических исследований




BC-3600

Автоматический Гематологический Анализатор

Сегодня лаборатории сталкиваются с множеством трудностей. Это и ограниченность бюджета, и повышающиеся требования, как к скорости, так и к надежности результатов, это и недостаток опытных сотрудников, и многое другое. Мы понимаем потребности пользователей, и на них основывается наш новый анализатор BC-3600. Совершенная и интуитивно понятная операционная система, удобный интерфейс, превосходные характеристики, системные решения BC-3600 делают его идеальным анализатором для широкого круга лабораторий.

- CBC+3-DIFF, 21 параметр+3 гистограммы
- Производительность: 60 проб в час
- Интуитивно понятная операционная система
- TFT сенсорный экран
- Улучшенные характеристики и надежные технологии
- Открытый пробоотбор и опция закрытого пробоотбора
- 40,000 результатов с гистограммами в памяти
- Реагенты, калибраторы и контрольные материалы от компании Mindray

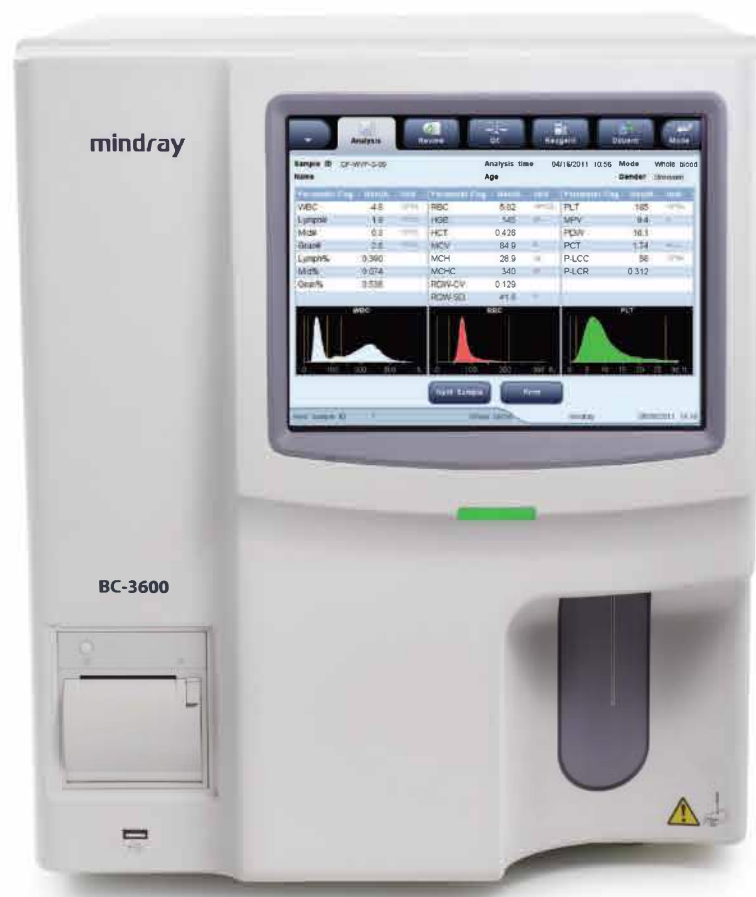

Мощная и удобная программа

Хорошо организованный интерфейс облегчает работу оператора и позволяет легко управлять результатами проб, информацией о пациентах и формами отчетов. Меню быстрого доступа облегчает и ускоряет работу. Результаты WBC, RBC и PLT показаны на едином экране. Программы автоматического обслуживания запускаются двойным щелчком, а ошибки устраняются по одному щелчку.




Дружественная пользователю программа



Полноценный обмен информацией

Встроенный протокол HL7 облегчает подключение к ЛИС. Большой выбор внешних подключений, в том числе RS232 для внешнего принтера, USB для загрузки значений QC, подключения сканера штрих-кодов и клавиатуры.

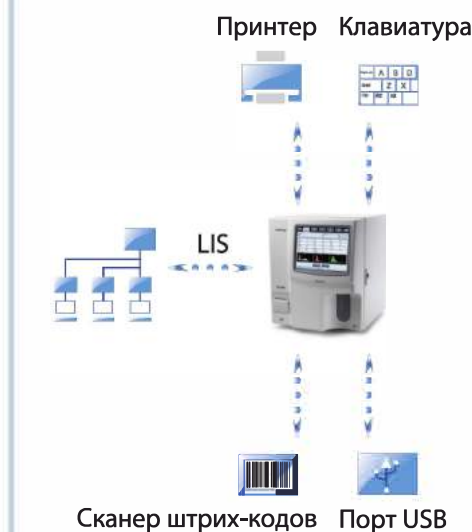

Интеллект и Эффективность

Эффективные методы прожига и промывки полностью удаляют загрязнения. В модели с закрытым пробоотбором предусмотрено 3 типа адаптеров для пробирок, чтобы соответствовать индивидуальным потребностям каждой лаборатории. Функцией напоминания в реальном времени программа помогает оператору следить за объемом остатка реагентов.

